

プログラム 01 疾病診断用プログラム
管理医療機器 パルスオキシメータ用プログラム JMDN : 17148072

パルミックアプリ

【警告】

本プログラムの使用中は、プログラムの表示する情報だけでなく、パルスオキシメータの表示についても随時確認し、患者の状況を判断すること。[患者の状況を誤って判断する恐れがある]


【形状・構造及び原理等】

機能

- ・本プログラムは、訪問診療時等においてパルスオキシメータで計測した動脈血酸素飽和度および脈拍数を自動受信し、患者情報管理プログラムへ自動記録を行う。受信した動脈血酸素飽和度、脈拍数、脈波形の表示および監視値の設定による監視値外れの通知機能がある。
- ・本プログラムは、IT 機器等にインストールして使用する。ダウンロードで提供される。

動作・動作原理

- ・パルスオキシメータから測定データを受信し、当該データを表示する。また当該データを患者情報管理プログラムへ出力することができる。
- ・接続例：IT 機器等は「使用方法」欄に記載した仕様を満たすものであること。

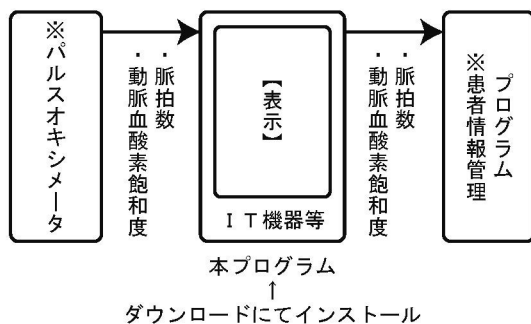

※パルスオキシメータ、患者情報管理プログラムは本プログラムには含まれない。

【使用目的又は効果】

使用目的

動脈血の経皮的酸素飽和度を表示すること。

【使用方法等】

詳細については、本プログラムの取扱説明書及び下記の関連する各製品の取扱説明書を参照して、その内容に従うこと。

組み合わせて使用する医療機器

- ・パルスオキシメータ Palmic
(認証番号:226ABBZX00079000)

本プログラムの導入が可能な IT 機器等の仕様

- ・Apple iPad (第 3 世代以降、iOS 7.0 以上)
- ・Apple iPad mini (第 1 世代以降、iOS 7.0 以上)
- ・Apple iPhone (第 5 世代以降、iOS 7.0 以上)
- ・Apple iPod touch (第 5 世代以降、iOS 7.0 以上)

組み合わせて使用する患者情報管理プログラム

- ・WithCare (株式会社ナルコム)

使用方法

1. 事前準備 (初めて使用する場合)

1. 本プログラムを導入する IT 機器等をインターネットに接続する。
2. IT 機器等で本プログラムをダウンロードしてインストールする。
3. パルスオキシメータの電源を入れ、IT 機器等と接続する。

2. 使用準備

1. IT 機器等の電源を入れ、インターネットに接続する。
2. パルスオキシメータの電源を入れ、IT 機器等と接続する。

3. IT 機器等の音声を ON にして、使用環境に合わせて音量を調節する。
4. IT 機器等がスリープ (自動ロック) 状態にならないように設定する。
5. 本プログラムを起動する。
6. 患者情報管理プログラムの登録 ID、パスワード、カルテ番号を入力し、患者情報管理プログラムへ接続してカルテ番号と患者名を表示させる。

3. 操作

1. 本プログラムの通知機能を使用する場合、動脈血酸素飽和度 (SpO₂) 監視値及び脈拍監視値の上限値及び下限値を設定する。
2. パルスオキシメータで患者の生体情報の測定を開始する。
3. パルスオキシメータより、動脈血酸素飽和度 (SpO₂) 及び脈拍数を取得し、パルスオキシメータに表示される値と本プログラムで表示される値を随時確認する。
4. 測定終了後は、本プログラムの STOP (記録) をタップすることで、患者情報管理プログラムへ測定データを記録する。

4. 終了

1. IT 機器等を操作して、本プログラムを終了する。
2. 必要に応じて IT 機器等の電源を切る。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. IT 機器等はパルスオキシメータの周辺に設置し、使用中は接続状態について確認すること。
2. 使用環境において、通知機能の音が認識できるか確認すること。
3. 使用中に画面表示が OFF にならないように、IT 機器等のスリープ (自動ロック) を解除しておくこと。
4. 本プログラムの機能を阻害しないように、IT 機器等の基本動作に係るプログラム以外を同時に起動しないこと。
5. 表示されたカルテ番号及び患者名が正しいか確認すること。
6. 動脈血酸素飽和度 (SpO₂) 監視値及び脈拍監視値の上限値及び下限値を適切な値に設定すること。
7. 取得した測定データは本プログラム内には保存されないため、測定終了後は患者情報管理プログラムへ測定データを記録すること。

【使用上の注意】

詳細については、本プログラムの取扱説明書及び関連する各製品の取扱説明書を参照して、その内容に従うこと。

重要な基本的注意

1. 本プログラムは、【使用方法等】「本プログラムの導入が可能な IT 機器等の仕様」に示した機器でのみ使用すること。
2. 本プログラムで表示された測定データは、使用者の責任において判断すること。

【保守・点検に係る事項】

詳細については、本プログラムの取扱説明書及び関連する各製品の取扱説明書を参照して、その内容に従うこと。

使用者による保守点検事項

1. 本プログラムを導入した IT 機器等が適正に機能することを確認すること
2. 本プログラムを適正に機能させるために、IT 機器等の OS と本プログラムを常に最新の状態になるように更新すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

発売元／製造販売元
株式会社ミクロン
TEL 03-3755-0396 (代) FAX 03-5747-5396
製造元
株式会社ミクロン